

La gama de los BagMixer®, referencia de los malaxadores de laboratorio con bolsa estéril, se completa con los modelos 100 y 3500 ml. Esta nueva gama, la más moderna y completa, permite la extracción fácil y segura de las bacterias de muestras sólidas. Es suficiente poner la muestra y el diluyente en una bolsa filtro estéril BagFilter®, y colocar la bolsa en el BagMixer®. Malaxar entre 30 y 60 segundos (para la mayoría de las muestras). El filtrado así puede ser pipeteado y analizado sin ningún riesgo de alteración o de contaminación cruzada. BagMixer® queda listo para malaxar una nueva muestra. **Este método es el más seguro y económico para preparación de muestras sólidas.**

**Garantía 3 años\***



### exclusivo

cuerpo y cámara de malaxado en inox  
fácil de limpiar  
paletas regulables  
silencioso

### Opcional

W (puerta ventana)  
o P (puerta inox)  
CoolMix®, WarmMix® :  
regulados en temperatura

## BagMixer® 100 “MiniMix®”

Industria alimentaria, cosmética,  
farmacéutica, clínica, agrícola...

Timer : 10 - 360 seg. o ∞, 6 - 9 golpes/segundo.  
35 x 20 x 17.5 cm, 8 kg - 110 V / 220 V  
Capacidad : 5 - 100 ml

## BagMixer® 400

Industria alimentaria, farmacéutica,  
clínica, médica, cosmética...

Timer : 30 - 210 seg. o ∞, 8 golpes/segundo  
40 x 27 x 26 cm, 16.5 kg - 110 V / 220 V  
Capacidad : 50 - 400 ml

## BagMixer® 3500 “JumboMix®”

Muestras grandes de alimentos, textiles, desechos,  
residuos de filtrado, pruebas de esterilidad, fangos...

Timer : 30 - 210 seg. o ∞, 3 - 6 golpes/seg.  
41 x 50 x 38 cm, 33 kg - 110 V / 220 V  
Capacidad : 400 - 3500 ml

\*con  
certificado  
de garantía

Todas las bolsas estériles interscience, BagFilter®, BagPage®, BagLight®, se adaptan a todos los modelos de malaxadores del mercado.

Indique la dirección en la que desee recibir nuestras informaciones, o corrija sus datos personales, en caso necesario.

Empresa \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Apellidos \_\_\_\_\_


Cargo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

CP, Ciudad \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

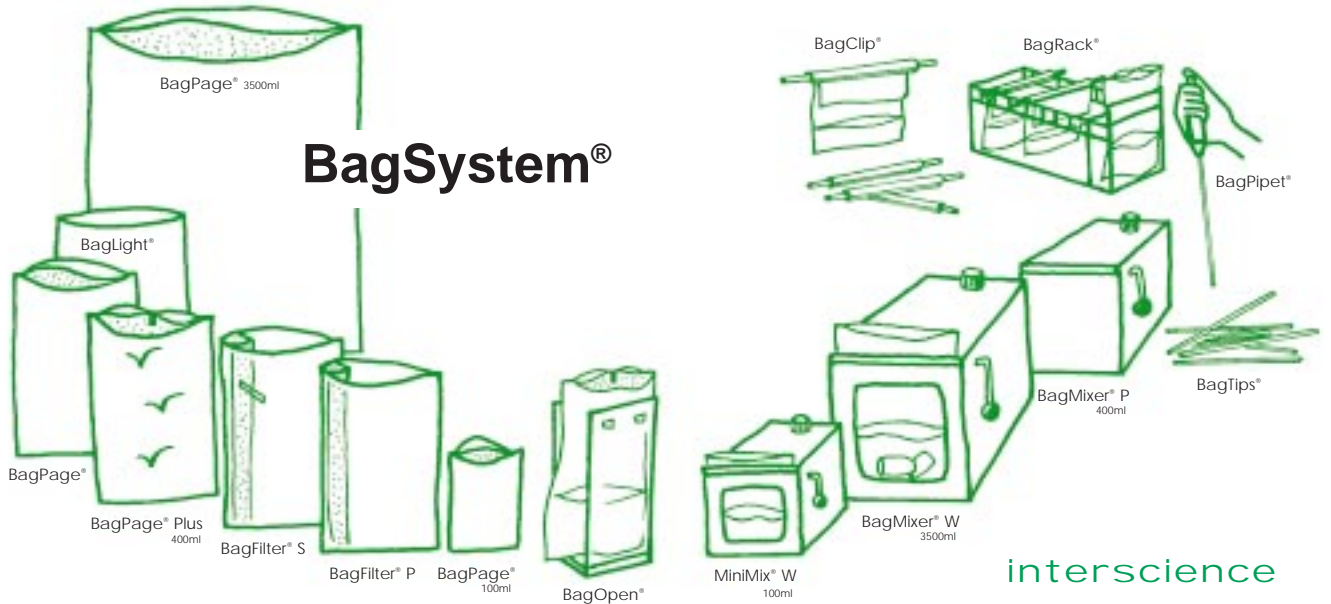

Por favor, rodee con un círculo los productos arriba representados, de los que quiera recibir información, muestras o una visita. Por favor, complete los datos de esta hoja. Para una contestación rápida, envíenos esta hoja **por fax**.



También disponemos de una gama de Higiene & Seguridad y autómatas de laboratorio. Pídanos información.

**Hygiene & Seguridad**

- |   | información              | muestras                 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Clinet® 101</b> (toallitas désinf. con clorhexidina) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Clinet® 303</b> (spray desinfectante)                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anabac®</b> (desodorante para autoclave)             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Autómatas**

- |  | información              | demostración             |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Spiral® Plater</b> (sembrador automático) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Scan® 500</b> (contador de colonias)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gravimat®</b> (diluidor gravimétrico)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

distribuidor

Por favor, envíe esta solicitud a su distribuidor local o a :

**interscience**

100 rte de Ste Gemme 78860 St Nom - France  
 Tel. +33 (0)1 34 62 62 61 Fax +33 (0)1 34 62 43 03  
 E-mail : info@interscience.fr Web : www.interscience.fr

Somafiler® y ® son marcas depositadas par Interscience F - 78860 Saint Nom. Datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso.

KJ 987E E

